


脂肪分離用遠心機 SuperVario-N

ゲルベル・バブコック・マジョニア管対応の遠心機

ロータA形の特長

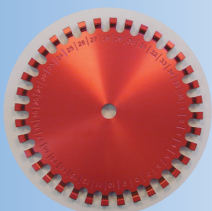


ゲルベル管バケット



バブコック管バケット

- ロータ交換が不要。
バケットを交換するだけで、ゲルベル法とバブコック法による脂肪分の測定が可能です。
- スイングロータなので使用容器が取り出しやすく、また分離界面が水平になります。
- ゲルベル管は最大36本、バブコック管なら最大で18本使用できます。

ロータB形の特長

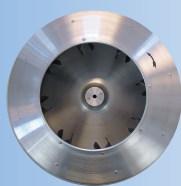

- レーゼ・ゴットリーブ法で使用するマジョニア管が最大8本使用できます。

- 加温したサンプル温度を一定に保つことができる加熱ヒータ付き。
- チャンバは腐食に強いステンレス製。
- 回転数、温度、時間はマイクロプロセッサ制御のデジタル表示で、精度と再現性が高い測定が可能です。
- 安全を考えて、ドアロックにはインタロック機構を標準装備。
回転中はドアを開けることができません。ロータが停止すると、自動的にドアロックが解除されます。
- すばやい減速が可能な電気ブレーキ付き。
- 大きな重量差があるときは、インバランスセンサが作動し自動停止します。
- 遠心加速度($\times g$)の表示機能付き。



回転数設定	600~1,200rpm、10rpmステップ
遠心力表示	77~372 $\times g$
制御方式	マイクロプロセッサ制御
温度設定	室温~68°C、1°Cステップ
時間設定	1~99分、1分ステップ
必要電源	100V、50/60Hz・15A (トランス付き)
寸法・質量	59(W)×63(D)×46(H)cm・26kg

◎価格(本体/税別) **997,000円**

●ロータ

ロータA形	ゲルベル管/バブコック管用	価格(税別)	105,000円
ロータB形	マジョニア管用×8本		130,000円

●ロータA形用バケット

ゲルベル管用バケット	2個セット	価格(税別)	11,200円
	24個セット		107,000円
	36個セット		130,000円
バブコック管用バケット	2個セット		37,000円

●プチロメータ用恒温水槽(デジタル式) 価格(本体/税別) 231,000円

スタンド別売。詳しくはお問い合わせください。

脂肪分離用遠心機 Nova Safety

ゲルベル管専用遠心機



ゲルベル管8本架けの専用機。低価格です。(当社比)

- ゲルベル管8本架けアングルロータが標準付属した専用機です。
- 時間、温度の設定と表示は、デジタル式です。
- ドアロックには、インタロックを標準装備。
- すばやい減速が可能な電気ブレーキ付き。

回転数	1,350rpm (固定)
遠心力	350×g ±50×g (固定)
加熱温度	25～65℃、5℃ステップ
時間設定	30秒～99分30秒、30秒ステップ
必要電源	100V、50/60Hz・15A (トランス付き)
寸法・質量	38 (W) × 47 (D) × 23 (H) cm・13kg

◎価格(ロータ付/税別) **331,000円**

久保田商事株式会社

E-mail: sales@kubotacorp.co.jp

www.kubotacorp.co.jp

本社	〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-9	☎(03) 3815-1331	FAX(03) 3814-2574
札幌営業所	〒065-0015 札幌市東区北15条東 10-2-6	☎(011) 751-2175	FAX(011) 751-2176
仙台営業所	〒984-0038 仙台市若林区伊在 3-7-2	☎(022) 287-2181	FAX(022) 287-2182
つくば営業所	〒305-0033 つくば市東新井 26-17	☎(029) 856-3211	FAX(029) 856-5811
名古屋営業所	〒480-1156 長久手市五合池 2211	☎(0561) 64-2351	FAX(0561) 64-2353
大阪営業所	〒540-0013 大阪市中央区内久宝寺町 4-2-17	☎(06) 6762-8471	FAX(06) 6762-8473
広島営業所	〒731-0138 広島市安佐南区祇園 4-51-26	☎(082) 871-7811	FAX(082) 871-7828
福岡営業所	〒813-0034 福岡市東区多の津 5-21-10	☎(092) 621-1161	FAX(092) 621-1162

製造元

Funke-Dr.N.Gerber Labortechnik GmbH
Ringstraße 42
12105 Berlin, Germany