

ウイルス病原体検出 遠心機マッチングガイド

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染検査方法は、おおきくわけて核酸検出検査・抗原検査・抗体検査があります。

核酸検出検査、抗原検査では遠心機を必要とする場合が多いため、これらの検査に合わせた遠心機を紹介いたします。

核酸検出検査（RT-PCR法・LAMP法）

マイクロチューブ



医療機器製造販売届出番号 10B3X00003000049



Model 3520

冷却あり

商品名	数量	価格（税別）
卓上マイクロ冷却遠心機 3520	1	500,000円
アングルロータ MA-2024 (1.5/2mL×24) Max.15,000rpm/Max.20,630×g	1	65,000円
スピнкаラム用アダプタ No.028-1360	1	50,400円
システム価格（税別）		615,400円



MA-2024



スピнкаラム用アダプタ

●3520気配りポイント



遠心機の前面から吸気し、上面後ろから排気する設計です。不快な排気風を気にせずにお使いいただけます。

スピнкаラム用アダプタを取り付けることで、チューブキャップがアダプタで支えられます。スピнкаラム取付時の遠心で、チューブ破損を防ぎます。



スピнкаラム用
アダプタ装着時



スピнкаラム用
アダプタ未装着時

抗原検査（定量検査・定性検査）

自立型喀痰チューブ



×4

50mLコニカル管



×4

15mLコニカル管



×16

医療機器製造販売届出番号 10B3X00003000050



Model S500T

冷却なし 医療機器



ST-2504MS
シーリングキャップ

- 「4000」が「S500T」にモデルチェンジ
- セルフチェック機能搭載
各種センサやドアロック動作までを簡単に確認することが出来ます。
- インバランス早期検知
インバランスを共振点前の低い回転数でお知らせします。機械に優しい設計です。
- 運転終了後、自動ドアロック解除
遠心終了後、OPEN操作を行う必要はありません。ドアを軽く上げるだけです（標準設定）。

商品名	数量	価格（税別）
卓上遠心機 S500T	1	343,000円
スイングロータ ST-2504MS（バケット付）	1	205,000円
チューブラック No.055-1210 （自立型喀痰チューブ×4）	1 （4個1組）	26,400円
チューブラック No.055-1170 （50mlコニカル管×4）	1 （4個1組）	26,400円
チューブラック No.055-1160 （15mlコニカル管×16）	1 （4個1組）	26,400円
シーリングキャップ No.055-0964	1 （4個1組）	21,000円
システム価格（税別）		648,200円

50mLコニカル管



×4

15mLコニカル管



×4

医療機器製造販売届出番号 10B3X00003000045




Model S300T

冷却なし 医療機器



RS-240A

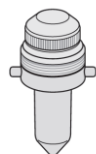

シールドバケット
No.053-0040



15mLコニカル管用アダプタ
No.055-1280（2個1組）

商品名	数量	価格（税別）
卓上遠心機 S300T	1	207,000円
スイングロータ RS-240A	1	40,000円
シールドバケット No.053-0040 （50mLコニカル管×4）	1 （4個1組）	114,000円
15mLコニカル管用アダプタ No.055-1280（15mLコニカル管×4）	2 （2個1組）	22,200円
システム価格（税別）		383,200円

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針「第3版」の検体の取り扱いでは、安全キャビネット内での検体処理が原則であると謳われております。
KUBOTAが扱っている、汚染・感染エアロゾルに対するバイオハザード対策遠心機用の安全キャビネットを紹介いたします。

安全キャビネット：鼻咽頭拭い液・鼻腔ぬぐい液・唾液の遠心処理に適しています。



安全キャビネット：BHC-660IFS II（クラス I）
遠心機：S700FR



LED照明点灯時のチャンバ内
遠心機：S700FR

● 安全キャビネットシステム価格

商品名	数量	価格（税別）
バイオハザード対策遠心機用 安全キャビネット BHC-660IFS II	1	1,575,000円
三方向ステー（オプション）*1	1	46,200円
システム価格*2（税別）		1,621,200円

*1 S700FR/S500FR以外の機種をBHC-660IFS II に組み込むときに必要です。
ご使用する機種を必ずご連絡ください。

*2 別途遠心機が必要です。

● 組込型なので、既にお使いいただいている遠心機本体に増設できます。

- ✓ 現行販売モデルS700FR・S500FR・6200以外では、既にご使用の5911・5922にも取り付けられます。
- ✓ 5911・5922でST-722Mロータをご使用の方は、ロータをST-5004M（シールドバケット）に変更することで、採血管本数が48本のまま安全キャビネットをご使用することが可能です。

● 作業効率を考えた設計です。

- ✓ スライド式の前面ドアは、好みの高さで止められます。
- ✓ 手元でON・OFF操作が出来るよう、すべてのボタンは手前に配置しています。
- ✓ LED照明灯は、チャンバ内を照らすので視認性が高くなります。
- ✓ 殺菌灯で遠心機チャンバ内の殺菌が可能です。
- ✓ フィルタ差圧計を搭載することで、HEPAフィルタの交換時期が分かります。